

Foot Bath Pied de SPA

フットバス ピエ・ド・スパ

取扱説明書

ご使用になる前に必ずご覧ください

無料修理規定

- 取扱説明書、その他の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書によりご購入先が無料修理致します。(但し、コードは除きます)
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参のうえ、ご購入先にご依頼ください。
 - ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるご購入先に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - 誤った使用または不適切な修理や改造による故障および損傷。
 - ご購入後の落とし込みによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - 本保証書の提示がない場合。
 - 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - 本体、コード、ヒーター、基板等いずれかの交換希望の場合。
 - 想定を超える過度な使用及び過酷な使用が認められた場合。
 - 本書記載の警告内容に抵触する使用が認められた場合。
 - 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ※ご購入先ではなく弊社に直接修理を依頼する場合は、発送とお受け取り両方の送料がかかります。

保証書(必ず記入してください)

商品名	フットバス ピエ・ド・スパ	保証対象	本体
購入日	年 月 日	保証期間	お買い上げ後 6ヶ月
お 住 所			
お 客 様			
お 名 前			
お 電 話			
販売店			

記入漏れのある場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は直ちにご購入先にお申し出ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※販売店の皆様へお願い

必ず購入日および販売店の住所、名称、電話番号をご記入していただき、またはスタンプ印を押してお客様へお渡しください。

発売元 株式会社トリコインダストリーズ

〒556-0022 大阪市浪速区桜川II2丁目9番4号 TEL:06-6568-0731 URL:<http://www.torico.co.jp>

••••• PROFESSIONAL FOOT BATH •••••

Foot Bath Pied de SPA

フットバス ピエ・ド・スパ

安全上の注意:ご使用前に必ずお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いを致しますと、人が重傷を負うか、又は死亡する恐れがあります。

製品・パッケージを包むボリエチレンの袋は玩具ではありません。乳幼児・子供の窒息を避けるため、この袋は必ず子供の手の届かないところに保管してください。



AC100V以外でご使用しないでください。火災、感電の原因になります。海外では使用しないでください。火傷や発火の原因になります。



屋内専用ですので屋外では絶対使用しないでください。また、水平な場所でご使用ください。



修理技術者以外の人は分解、修理はしないでください。ケガや感電、火災の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



幼児へのご使用はしないでください。手の届くところで使わないでください。子供だけで使わせたり遊ばせないよう、必ず責任者が監督してください。



電気コードを必要以上に引っぱらないでください。また、ぬれた手でプラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。



風呂場・シャワー等の水場、及び温湯の多い場所での保管・ご使用はしないでください。ショート、感電の原因になります。



痛んだコード、プラグ、緩んだコンセントでのご使用はしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。



職場を離れる時、終業時は電源をオフにして、コンセントからコードを外してください。



コードは無理に引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、踏んだりしないでください。本体でコードを踏んでいないか確認してください。



プラグを抜く時は、コードを持たず、先端のプラグを持って抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



本体を水や液状のものに浸さないでください。事故や故障の原因となります。



● 禁止 を表します ● 分解禁止 を表します ● 浴室使用禁止 を表します
● 必ず電源プラグをコンセントから抜け を表します ● 必ず実行せよ を表します

お客様の安全の為に、責任者が指導・監督する場合以外は以下の方は使用しないでください
●身体的・感覚的・精神的能力が減少されている方 ●商品の知識・取り扱いにおいて経験不足の方



注意

○△の中に注意マークが記入されています。
この表示を無視して、誤った取扱いを致しますと、人又は物的傷害が発生する恐れがあります。

水の入った本製品に足を浸したままコンセントを抜き差ししないでください。電源がOFFになっていることを確認してからコンセントから抜いてください。



眠っている時、寝い時のご使用はお控えください。また体温のすぐれない時のご使用もお控えください。



本体はイス等に座ってご使用ください。本体の中には絶対に立たないでください。事故・故障の原因となります。



本製品の通電中にタオルや毛布等をかけないでください。発火及び火災の可能性があり大変危険です。



刺激や痛みを感じたり、不快感がある時はご使用を中止してください。足に腫れや炎症、発疹等ある場合は絶対に使用しないでください。



ご使用中は本体の表面や入れているお湯が熱くなりますのでご注意ください。



本製品は家庭用電源（AC100V）専用です。他の電源では使用しないでください。



本製品は1人用です。2人以上でご使用にならないでください。ケガや事故の恐れがあります。



長時間の連続使用はお控えください。ご使用後は20分ほどクールダウンしてください。



本体に42°C以上の湯を入れてのご使用はお控えください。ケガや故障の原因になります。



小さな子供や動物の近くでご使用しないでください。事故やケガの原因になります。本製品を道具としてご使用しないでください。



次の場合はご使用をおやめください
1. 使用中に何か不具合を感じる
2. プラグ・コードの損傷
3. 本体を落とした・損傷を発見した



警告

※本体から水漏れが起きた際はご使用を中止してください。
※コードが損傷した場合、販売店に修理を依頼してください。

ご注意


※水場の近くで使用しないでください。

※ご使用後は本体の汚れ・水分などを拭き取ってください。

※本体はボディーケア用であり、足の洗浄用ではありません。用途以外では使用しないでください。

ご使用の前に


●本製品はボディーケア用です。用途以外には使用しないでください。

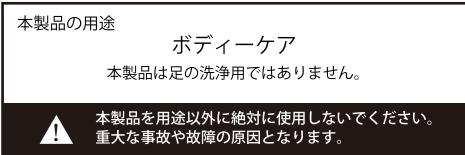

- ご使用前に本製品の設置箇所が水平であることを確認してください。
- 足の洗浄用ではありません。足を清潔な状態にしてからご使用ください。
- 本製品をイスの前に置き、実際に座ってから正確な位置を決めてください。
- ヒーター付近の水は熱くなりますので気をつけてください。
- 長時間の連続使用はお控えください。連続使用の目安は30分です。

使い方

1.プラグをコンセントに差し込みます。

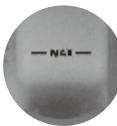

2.適温のお湯を本体に注いでください。
本体のMAX表示まで入れてください。

3.楽な姿勢で座ってコントロールスイッチからお好みの機能を選択してご使用ください。機能の説明は本書の『各部の名称』をご覧ください。

4.ご使用後はコントロールスイッチをOFFにして、プラグを抜いてください。

5.お湯を捨てるときは、本体をシンクかバスタブの上に傾け、お湯を流してください。汚れをすすぎ落とします。

6.しっかり乾かしてから湿気の少ない場所で保管してください。

※ご注意※

※本体の上には絶対に立たないでください。

※水位は MAX 表示までです。

※本体を水、液体物には絶対に浸さないでください。

お手入れ

●必ずプラグをコンセントから抜き、お手入れしてください。

●必要な場合は中性洗剤と水で絞った布で、本体の表面を拭き、乾かしてください。先の尖った物、研磨用または可燃性のクレンザーは使用しないでください。本体の表面、電源の破損の原因になります。

●細菌の繁殖を防ぐため、中性消毒液、アルコール等で全部品を定期的に拭いてください。本体に直接消毒液を落とさないでください。故障の原因になります。

※ご注意※

※漂白剤、シンナー、ガソリン等は絶対に使用しないでください。

アフターサービス



注意

ピエ・ド・スパ本体の改造、分解、修理は絶対にしないでください。
異常作動による発火の原因となります。




ご使用中に以下が生じた時は使用を中止し、故障や事故防止のため電源をOFFにしてから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

- 本体もしくはお湯が異常に熱くなっている。 ●エアーが出ない。
- 本体より異音または異臭がする。 ●その他の異常、故障がある。



ご使用を中止し、販売店にご連絡ください。

各部の名称

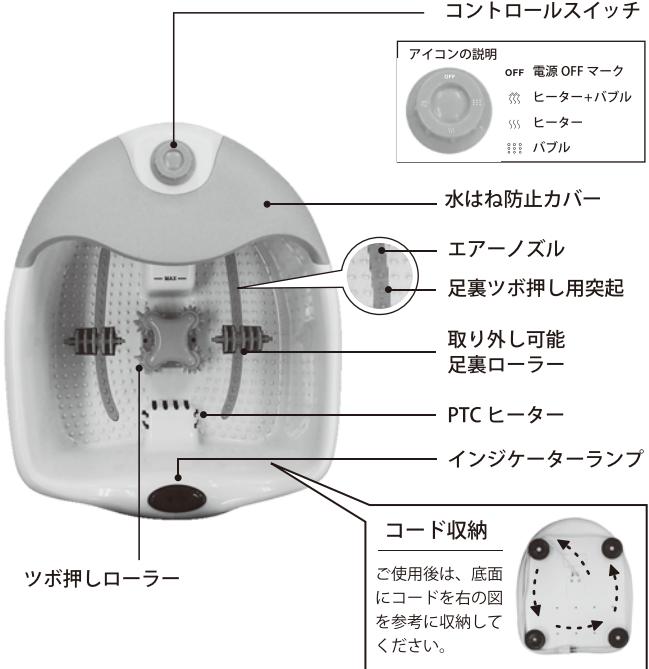

製品仕様

品番	PS3871	電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	330W	重量	約 2.4kg (コード含む)
サイズ	45.5×38×23cm	コード	160cm
温度	38°C~42°C ※1	最大容量	約 5.5 ℥ ※2

※1 温度は周囲の室温や注ぐ水温によって異なります。

※2 MAX 表示位置までの最大容量となります。

ピエ・ド・スパ修理についてのお願い

故障の際は、下記注意事項をよくお読みいただき、ご購入されたお店へ修理のご依頼をお願い致します。弊社へ直接修理をご依頼される場合は、以下の規定をご了承のうえ、下記の連絡先へご連絡ください。

■取扱説明書に従った正常な使用方法での故障の場合

- ①購入日より6ヶ月未満のもの（必ず保証書を添付してください）
修理代 無料（保証対象外となる場合は有料）
弊社までの送料 お客様負担
修理後の弊社からの送料 無料（保証対象外となる場合は有料）
※保証期間内でも保証書の提示がない場合など、有料になる場合があります。（詳しくは本書「無料修理規定」を参照してください。）

- ②購入日より6ヶ月以上経過したもの

- 修理代 有料（代引きにてお送り致します）
弊社までの送料 お客様負担
修理後の弊社からの送料 お客様負担（代引きにてお送り致します）

■取扱説明書の内容に従わない使用方法で故障した場合

保証期間内であっても全て有料になります。その際の弊社までの送料及び修理後の弊社からの送料は共にお客様負担となります。（修理代、送料を合計して代引きにてお送り致します。）

■新品不良品について

当製品は動作テストを行った上で販売しておりますが、万が一、不良の場合は修理もしくは新品交換させていただきます。その場合は製品と本書をご用意のうえ、ご購入先にご連絡ください。

修理についてのお問い合わせ

修理についてご質問、ご不明な点がございましたら弊社にご相談ください。

株式会社トリコ インダストリーズ 修理受付係

〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4

TEL : 06-6568-0731(平日9時~17時) e-mail : syuri@torico.co.jp

※修理品をお送りの際は、返送先及び連絡先(電話番号)を明記してください。